


	DV	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
+5.50	6.00	6.00/-0.75	6.00/-1.25	6.00/-1.25	6.00/-1.75	6.00/-2.25	6.00/-2.25	6.00/-2.25	6.00/-2.25		
+5.25	5.50	5.50/-0.75	5.50/-0.75	5.50/-1.25	5.50/-1.75	5.50/-1.75	5.50/-2.25	5.50/-2.25	5.50/-2.25		
+5.00	5.25	5.25/-0.75	5.25/-0.75	5.25/-1.25	5.25/-1.75	5.25/-1.75	5.25/-2.25	5.25/-2.25	5.25/-2.25		
+4.75	5.00	5.00/-0.75	5.00/-0.75	5.00/-1.25	5.00/-1.75	5.00/-1.75	5.00/-2.25	5.00/-2.25	5.00/-2.25		
+4.50	4.75	4.75/-0.75	4.75/-0.75	4.75/-1.25	4.75/-1.75	4.75/-1.75	4.75/-2.25	4.75/-2.25	4.75/-2.25		
+4.25	4.50	4.50/-0.75	4.50/-0.75	4.50/-1.25	4.50/-1.75	4.50/-1.75	4.50/-2.25	4.50/-2.25	4.50/-2.25		
+4.00	4.25	4.25/-0.75	4.25/-0.75	4.25/-1.25	4.25/-1.75	4.25/-1.75	4.25/-2.25	4.25/-2.25	4.25/-2.25		
+3.75	4.00	3.75/-0.75	3.75/-0.75	3.75/-1.25	3.75/-1.25	3.75/-1.75	3.75/-1.75	3.75/-2.25	3.75/-2.25		
+3.50	3.50	3.50/-0.75	3.50/-0.75	3.50/-1.25	3.50/-1.25	3.50/-1.75	3.50/-1.75	3.50/-2.25	3.50/-2.25		
+3.25	3.25	3.25/-0.75	3.25/-0.75	3.25/-1.25	3.25/-1.25	3.25/-1.75	3.25/-1.75	3.25/-2.25	3.25/-2.25		
+3.00	3.00	3.00/-0.75	3.00/-0.75	3.00/-1.25	3.00/-1.25	3.00/-1.75	3.00/-1.75	3.00/-2.25	3.00/-2.25		
+2.75	2.75	2.75/-0.75	2.75/-0.75	2.75/-1.25	2.75/-1.25	2.75/-1.75	2.75/-1.75	2.75/-2.25	2.75/-2.25		
+2.50	2.50	2.50/-0.75	2.50/-0.75	2.50/-1.25	2.50/-1.25	2.50/-1.75	2.50/-1.75	2.50/-2.25	2.50/-2.25		
+2.25	2.25	2.25/-0.75	2.25/-0.75	2.25/-1.25	2.25/-1.25	2.25/-1.75	2.25/-1.75	2.25/-2.25	2.25/-2.25		
+2.00	2.00	2.00/-0.75	2.00/-0.75	2.00/-1.25	2.00/-1.25	2.00/-1.75	2.00/-1.75	2.00/-2.25	2.00/-2.25		
+1.75	1.75	1.75/-0.75	1.75/-0.75	1.75/-1.25	1.75/-1.25	1.75/-1.75	1.75/-1.75	1.75/-2.25	1.75/-2.25		
+1.50	1.50	1.50/-0.75	1.50/-0.75	1.50/-1.25	1.50/-1.25	1.50/-1.75	1.50/-1.75	1.50/-2.25	1.50/-2.25		
+1.25	1.25	1.25/-0.75	1.25/-0.75	1.25/-1.25	1.25/-1.25	1.25/-1.75	1.25/-1.75	1.50/-2.25	1.50/-2.25		
+1.00	1.00	1.00/-0.75	1.00/-0.75	1.00/-1.25	1.00/-1.25	1.00/-1.75	1.00/-1.75	1.00/-2.25	1.00/-2.25		
+0.75	0.75	0.75/-0.75	0.75/-0.75	0.75/-1.25	0.75/-1.25	0.75/-1.75	0.75/-1.75	0.75/-2.25	0.75/-2.25		
+0.50	0.50	0.50/-0.75	0.50/-0.75	0.50/-1.25	0.50/-1.25	0.50/-1.75	0.50/-1.75	0.50/-2.25	0.50/-2.25		
+0.25	0.25	0.25/-0.75	0.25/-0.75	0.25/-1.25	0.25/-1.25	0.25/-1.75	0.25/-1.75	0.25/-2.25	0.25/-2.25		
0.00	0.00	0.00/-0.75	0.00/-0.75	0.00/-1.25	0.00/-1.25	0.00/-1.75	0.00/-1.75	0.00/-2.25	0.00/-2.25		
-0.25	-0.25	-0.25/-0.75	-0.25/-0.75	-0.25/-1.25	-0.25/-1.25	-0.25/-1.75	-0.25/-1.75	-0.25/-2.25	-0.25/-2.25		
-0.50	-0.50	-0.50/-0.75	-0.50/-0.75	-0.50/-1.25	-0.50/-1.25	-0.50/-1.75	-0.50/-1.75	-0.50/-2.25	-0.50/-2.25		
-0.75	-0.75	-0.75/-0.75	-0.75/-0.75	-0.75/-1.25	-0.75/-1.25	-0.75/-1.75	-0.75/-1.75	-0.75/-2.25	-0.75/-2.25		
-1.00	-1.00	-1.00/-0.75	-1.00/-0.75	-1.00/-1.25	-1.00/-1.25	-1.00/-1.75	-1.00/-1.75	-1.00/-2.25	-1.00/-2.25		
-1.25	-1.25	-1.50/-0.75	-1.50/-0.75	-1.25/-1.25	-1.25/-1.25	-1.25/-1.75	-1.25/-1.75	-1.25/-2.25	-1.25/-2.25	-1.25/-2.25	
-1.50	-1.50	-1.50/-0.75	-1.50/-0.75	-1.50/-1.25	-1.50/-1.25	-1.50/-1.75	-1.50/-1.75	-1.50/-2.25	-1.50/-2.25	-1.50/-2.25	
-1.75	-1.75	-1.75/-0.75	-1.75/-0.75	-1.75/-1.25	-1.75/-1.25	-1.75/-1.75	-1.75/-1.75	-1.75/-2.25	-1.75/-2.25	-1.75/-2.25	
-2.00	-2.00	-2.00/-0.75	-2.00/-0.75	-2.00/-1.25	-2.00/-1.25	-2.00/-1.75	-2.00/-1.75	-2.00/-2.25	-2.00/-2.25	-2.00/-2.25	
-2.25	-2.25	-2.25/-0.75	-2.25/-0.75	-2.25/-1.25	-2.25/-1.25	-2.25/-1.75	-2.25/-1.75	-2.25/-2.25	-2.25/-2.25	-2.25/-2.25	
-2.50	-2.50	-2.50/-0.75	-2.50/-0.75	-2.50/-1.25	-2.50/-1.25	-2.50/-1.75	-2.50/-1.75	-2.50/-2.25	-2.50/-2.25	-2.50/-2.25	
-2.75	-2.75	-2.75/-0.75	-2.75/-0.75	-2.75/-1.25	-2.75/-1.25	-2.75/-1.75	-2.75/-1.75	-2.75/-2.25	-2.75/-2.25	-2.75/-2.25	
-3.00	-3.00	-3.00/-0.75	-3.00/-0.75	-3.00/-1.25	-3.00/-1.25	-3.00/-1.75	-3.00/-1.75	-3.00/-2.25	-3.00/-2.25	-3.00/-2.25	
-3.25	-3.25	-3.25/-0.75	-3.25/-0.75	-3.25/-1.25	-3.25/-1.25	-3.25/-1.75	-3.25/-1.75	-3.25/-2.25	-3.25/-2.25	-3.25/-2.25	
-3.50	-3.50	-3.50/-0.75	-3.50/-0.75	-3.50/-1.25	-3.50/-1.25	-3.50/-1.75	-3.50/-1.75	-3.50/-2.25	-3.50/-2.25	-3.50/-2.25	
-3.75	-3.75	-3.75/-0.75	-3.75/-0.75	-3.75/-1.25	-3.75/-1.25	-3.75/-1.75	-3.75/-1.75	-3.75/-2.25	-3.75/-2.25	-3.75/-2.25	
-4.00	-3.75	-3.75/-0.75	-3.75/-0.75	-3.75/-1.25	-3.75/-1.25	-3.75/-1.75	-3.75/-1.75	-3.75/-2.25	-3.75/-2.25	-4.00/-2.25	
-4.25	-4.00	-4.00/-0.75	-4.00/-0.75	-4.00/-1.25	-4.00/-1.25	-4.00/-1.75	-4.00/-1.75	-4.00/-2.25	-4.00/-2.25	-4.25/-2.25	
-4.50	-4.25	-4.25/-0.75	-4.25/-0.75	-4.25/-1.25	-4.25/-1.25	-4.25/-1.75	-4.25/-1.75	-4.25/-2.25	-4.25/-2.25	-4.25/-2.25	
-4.75	-4.50	-4.50/-0.75	-4.50/-0.75	-4.50/-1.25	-4.50/-1.25	-4.50/-1.75	-4.50/-1.75	-4.50/-2.25	-4.50/-2.25	-4.50/-2.25	
-5.00	-4.75	-4.75/-0.75	-4.75/-0.75	-4.75/-1.25	-4.75/-1.25	-4.75/-1.75	-4.75/-1.75	-4.75/-2.25	-4.75/-2.25	-4.50/-2.25	
-5.25	-5.00	-5.00/-0.75	-5.00/-0.75	-5.00/-1.25	-5.00/-1.25	-5.00/-1.75	-5.00/-1.75	-5.00/-2.25	-5.00/-2.25	-4.75/-2.25	
-5.50	-5.25	-5.25/-0.75	-5.25/-0.75	-5.25/-1.25	-5.25/-1.25	-5.25/-1.75	-5.25/-1.75	-5.25/-2.25	-5.25/-2.25	-5.00/-2.25	
-5.75	-5.50	-5.50/-0.75	-5.50/-0.75	-5.50/-1.25	-5.50/-1.25	-5.50/-1.75	-5.50/-1.75	-5.50/-2.25	-5.50/-2.25	-5.25/-2.25	
-6.00	-5.50	-5.50/-0.75	-5.50/-0.75	-5.50/-1.25	-5.50/-1.25	-5.50/-1.75	-5.50/-1.75	-5.50/-2.25	-5.50/-2.25	-5.00/-2.25	
-6.50	-6.00	-6.00/-0.75	-6.00/-0.75	-6.00/-1.25	-6.00/-1.25	-6.00/-1.75	-6.00/-1.75	-6.00/-2.25	-6.00/-2.25	-6.00/-2.25	
-7.00	-6.50	-6.50/-0.75	-6.50/-0.75	-6.50/-1.25	-6.50/-1.25	-6.50/-1.75	-6.50/-1.75	-6.50/-2.25	-6.50/-2.25	-6.50/-2.25	
-7.50	-6.50	-6.50/-0.75	-6.50/-0.75	-6.50/-1.25	-6.50/-1.25	-6.50/-1.75	-6.50/-1.75	-6.50/-2.25	-6.50/-2.25	-6.50/-2.25	
-8.00	-7.00	-7.00/-0.75	-7.00/-0.75	-7.00/-1.25	-7.00/-1.25	-7.00/-1.75	-7.00/-1.75	-7.00/-2.25	-7.00/-2.25	-7.00/-2.25	
-8.50	-7.50	-7.50/-0.75	-7.50/-0.75	-7.50/-1.25	-7.50/-1.25	-7.50/-1.75	-7.50/-1.75	-7.50/-2.25	-7.50/-2.25	-7.50/-2.25	
-9.00	-8.00	-8.00/-0.75	-8.00/-0.75	-8.00/-1.25	-8.00/-1.25	-8.00/-1.75	-8.00/-1.75	-8.00/-2.25	-8.00/-2.25	-8.00/-2.25	
-9.50	-8.50	-8.50/-0.75	-8.50/-0.75	-8.50/-1.25	-8.50/-1.25	-8.50/-1.75	-8.50/-1.75	-8.50/-2.25	-8.50/-2.25	-8.50/-2.25	
-10.00	-9.00	-9.00/-0.75	-9.00/-0.75	-9.00/-1.25	-9.00/-1.25	-9.00/-1.75	-9.00/-1.75	-9.00/-2.25	-9.00/-2.25	-9.00/-2.25	

Guía de Parámetros para Lentes de Contacto Tóricos

Nota importante:

- Cuando son ejes, 15, 25, 35, etc.
Si es ojo derecho se restan 5°
Si es ojo izquierdo se suman 5°
- Si la marca gira a favor de las manecillas del reloj, sume los grados del eje a la receta.
- Si la marca gira en contra de las manecillas del reloj, reste los grados del eje de la receta.
- La receta final del paciente dependerá del criterio clínico del adaptador.

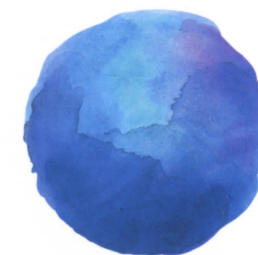

CooperVision™



CooperVision®